


# MONTAÑISMO ADAPTADO Silla Joëlette



## **ÍNDICE**

MONTAÑISMO ADAPTADO Silla Joëlette.....	1
¿QUÉ ES LA SILLA JOËLETTE?.....	3
• Tipos de sillas Joëlette.....	3

## ● ¿QUÉ ES LA SILLA JOËLETTE?

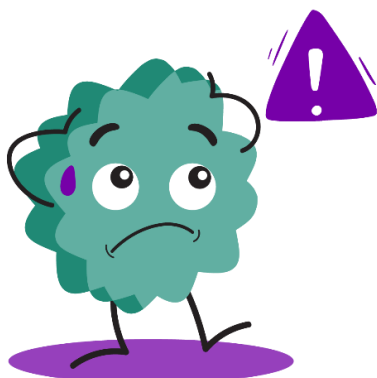

Es una silla “todoterreno” que permite a cualquier persona con movilidad reducida o con discapacidad practicar senderismo o participar en carreras, con la ayuda de al menos dos acompañantes.


La persona acompañante de la parte de atrás es la que asegura el equilibrio de la Joëlette y la persona acompañante de la parte delantera es la encargada de la tracción y dirección.

Esta silla está diseñada para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a los lugares que las sillas convencionales no pueden llegar, además se puede plegar lo que permite guardarla en el maletero de un coche.

### • Tipos de sillas Joëlette

#### ✓ Silla Joëlette mono-rueda:

Fabricada en tubos de acero mecano-soldados de alto límite elástico que la hacen muy resistente a la fatiga y a la carga soportada. Sobre ellos se sostiene un asiento de 46 cm de ancho que permite transportar a usuarios de diverso peso y tamaño.

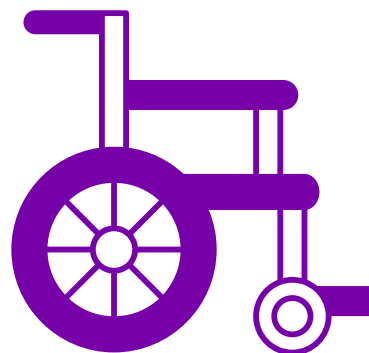

La estructura es de 27 kg y se puede plegar fácilmente en menos de tres minutos para poder guardarla en el maletero del coche.

Ofrece un alto grado de confort gracias a su amortiguación que proporciona una conducción suave, cómoda y bien controlada y a sus cojines ergonómicos.

La rueda es de 50 cm e incorpora un neumático de gel antipinchazos. Tiene freno disco hidráulico con protección de policarbonato.

✓ Silla Joëlette twin doble rueda:

Permite el acceso a cualquier terreno, desde senderos con poco desnivel a rutas de alta montaña, bosques, parques y espacios naturales.

Además, está pensada para la práctica deportiva de carreras sobre asfalto.

Dispone de dos ruedas ultraligeras de 50 cm de diámetros y una tercera rueda desmontable para aportar estabilización lateral.



✓ Silla Joëlette eléctrica:

La silla mono-rueda utiliza la asistencia eléctrica con una ayuda progresiva de hasta 6 km/h, de modo, que evita al usuario realizar grandes esfuerzos. Este sistema es el complemento idóneo para excursiones de largo recorrido, terrenos con grandes desniveles o cuando el usuario tiene un peso elevado.

La asistencia eléctrica no es un dispositivo de uso continuado, pero esta ayuda es útil cuando hay irregularidades en el terreno que pueden ser complicadas de salvar con una silla manual.

Tiene una autonomía de aproximadamente dos a cuatro horas y la carga completa tarda en realizarse unas tres horas,

Tanto el modelo kit eléctrico, como la doble rueda, puede ser intercambiable a partir de la silla mono-rueda. Es decir, si tenemos una silla mono-rueda podemos incorporarle el sistema eléctrico o la doble rueda en cualquier momento.

✓ Silla Joëlette Kids:

Esta silla está pensada para niños y niñas de hasta 25 kg. Tiene dos ruedas en la línea con neumáticos que nos permiten acceder a cualquier terreno.

Además, puede ser manejada por el acompañante posterior, aunque es recomendable, por motivos de estabilidad, equipararla con los brazos delanteros para que el segundo acompañante ayude a salvar obstáculos y desniveles más pronunciados.

Su amortiguación es tipo bicicleta ajustable y sus ruedas tienen gel antipinchazos.